

AMBRA - ISTRUZIONI UTILIZZO

LOGIN

1. Aprire **GOOGLE CHROME** e collegarsi al sito : <https://croaviano.dicomgrid.com> oppure andare sul sito del CRO www.cro.it e cliccare sul quadrante a fondo pagina "INVIA I TUOI ESAMI AL CRO", andare nel settore Operatori CRO a fondo pagina e accedere ad AMBRA mediante il link.
(Se non si possiede **GOOGLE CROME** scaricarlo dal link <https://www.google.it/chrome/browser/desktop/> presente nella stessa pagina)
2. Se abilitati, eseguire accesso con Login e Password, il Login è la email utilizzata per registrazione



Sign In

Login

Password

[Forgot your password?](#)

[Sign In](#)

Register

[Register here](#)


[Indications for Use](#) [Terms of Use](#) [Privacy Policy](#)

Se non si è registrati contattare gtomasini@cro.it


Se non si ricorda la **PASSWORD** cliccare su "**FORGOT YOUR PASSWORD**" e recuperare la password mediante la email che arriva all'indirizzo di posta elettronica in questione.

UPLOAD DI UNO STUDIO DA CD-CDROM OPPURE DA CARTELLA/FILE

1. Selezionare prima dal menu Studies il gruppo su cui si vuole caricare lo studio
2. Cliccare su **ADD STUDY** e selezionare **UPLOAD STUDY**

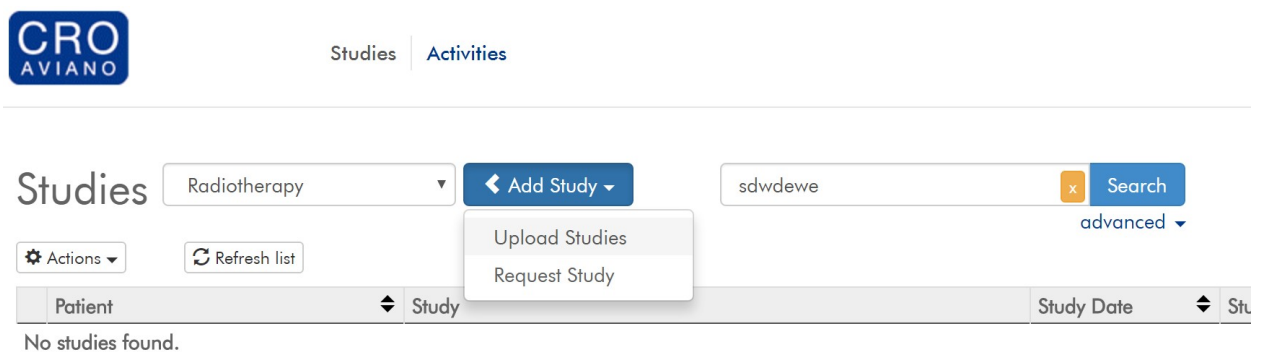

3. Selezionare l'unità **CD** oppure la cartella in cui è contenuto lo Studio che si vuole Caricare

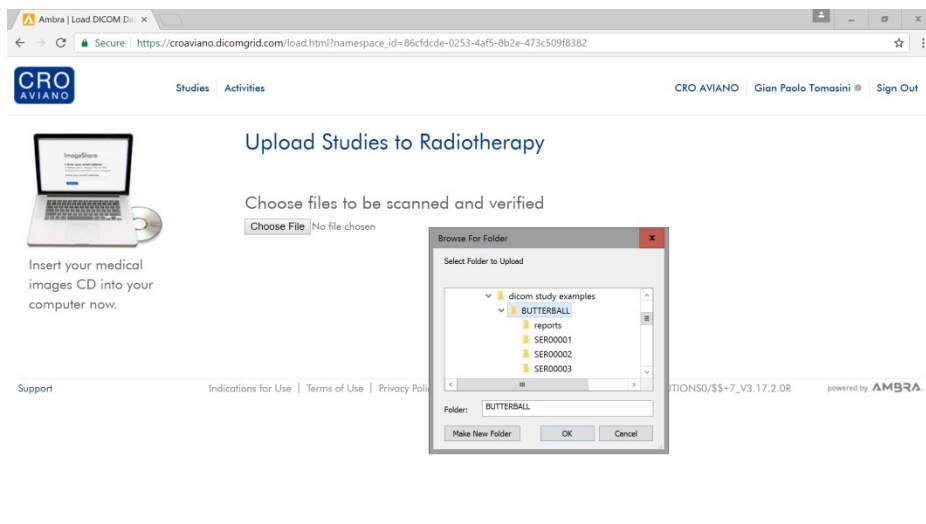

4. Attendere il termine della la scansione e Eseguire **UPLOAD SELECTED STUDIES**

Choose studies to upload

Choose File 5 files

	Description	Images	Patient Name	DOB	Modality	Study Date
<input checked="" type="checkbox"/>	Gobble gobble	3	BUTTERBALL	29/02/1904	CR, KO, PR	20/08/2013

Upload Selected Studies

Cancel

- Premere menu **ACTIVITIES** e confermare l'entrata dello studio **"APPROVE"**



Studies | Activities **1**

CRO AVIANO | Gian Paolo Toma

Activities Process incoming studies, join requests

Approve Reject

<input type="checkbox"/>	Type	Date	To	From		
<input type="checkbox"/>	Study Share	15/02/2017 01:33 PM	Radiotherapy	Gian Paolo Tomasini	Patient Name: BUTTERBALL Patient DOB: 29/02/1904 Patient ID: TURKEY Patient Sex: F Modality: CR Exam Description: Gobble gobble Referring Physician: MULLOY Study Date: 20/08/2013 Images: 3	Approve Edit View

5. Lo studio in questione dopo circa 30 secondi appare dentro **STUDIES** e sotto il **GRUPPO** selezionato inizialmente



Studies

Radiotherapy

Add Study

butter

Search advanced

Actions

Refresh list

Select study search

Patient	Study	Study Date	Study Updated	Actions
BUTTERBALL DOB: 29/02/1904 MRN: TURKEY	GOBBLE GOBBLE CR 3 images Acc#: 74693 RPhys: MULLOY	20/08/2013 08:55 AM	10/02/2017 02:20 PM	Reports Processing

100 items per page

< Prev p. 1 Next >

RICHIESTA DI CARIAMENTO DI UNO STUDIO VIA EMAIL

1. Selezionare prima dal menu Studies il gruppo su cui si vuole caricare lo studio
2. Cliccare su **ADD STUDY** e selezionare **REQUEST STUDY**
3. **INSERIRE LA EMAIL** del destinatario a cui si vuole richiedere lo studio e premere **REQUEST STUDY**

CRO AVIANO | Studies | Activities

Studies Radiotherapy Add Study sdwdewe Search advanced

Actions Refresh list

Upload Studies
Request Study

Patient	Study	Study Date	Stu
No studies found.			

Amбра | Studies | Studies | Activities | CRO AVIANO | Gian Paolo Tomasini | Sign Out

Request Study

Enter an email address and message to send a link to upload a study.

Email: gtomasini@cro.it

Notify of Link Use: email address

Message: message

Maximum Hits: count

Maximum Duration (minutes): minutes

Link Password: password

Request Study Close

Butterball (F) DOB 29/02/1904 MRN TURKEY

100 items per page < Prev p. 1 Next >

powered by AMBRA

RICHIEDERE STUDIO DA PACS OPPURE NODORT

1. Selezionare prima dal menu Studies il gruppo su cui si vuole caricare lo studio
2. Cliccare su **ADD STUDY** e selezionare **QUERY RETRIEVE**
3. Inserire il nome del paziente seguito da "*" come nella figura e premere **SEARCH**
4. Il risultato della ricerca verrà visualizzato sotto il menu **ACTIVITIES**, premere **RETRIEVE**
In corrispondenza dello studio di interesse.

The screenshot shows the 'Studies' search interface in the CRO AVIANO system. The 'Destination' is set to 'PACS:SFVGI(CRO)'. The search form includes fields for 'Study UID', 'Patient Name', 'Patient Sex', 'Patient ID', 'Patient DOB', 'Accession #', 'Referring Physician', 'Modality', 'Start Date', and 'End Date'. A 'Search' button is located at the bottom of the form.

inconsidera richiamare corrispondenza dello stu

Activities Process incoming studies, join requests

Type	Date	To	From		Search
Query Retrieve	15-02-2017 02:25 PM	CRO AVIANO	PACS:SFVGI(CRO)	Patient Name: prova1*prova Patient DOB: 11-03-2015 Patient ID: 031120151314 Patient Sex: F Modality: MG Exam Description: No Views Study Date: 03-11-2015 Accession #: 000000 Referring physician:	Retrieve Reject
Query Retrieve	15-02-2017 02:25 PM	CRO AVIANO	PACS:SFVGI(CRO)	Patient Name: prova2*prova Patient DOB: Patient ID: 2 Patient Sex: O Modality: NM Exam Description: User&Ossee&Whole Body Bone Study Date: 27-03-2015 Accession #: Referring physician:	Retrieve Reject

6. il trasferimento impiega circa **5 MINUTI** e lo studio arriverà nel gruppo dal quale è partita la richiesta.

CONDIVIDERE UNO STUDIO CON ALTRO GRUPPO –REPARTO- EMAIL

1. Selezionare il gruppo che contiene lo studio (esempio Radiology)
2. Selezionare il paziente
3. Cliccare su **ACTIONS** a selezionare **SHARE**
4. Selezionare **GROUPS** per condividere con Gruppi oppure **EMAIL** per condividere con Email.

